

De kunst van keramiek verven.



*initial*TM
Verfoplossingen

Lustre Pastes NF
Spectrum Stains

'GC.'




Verf uw esthetiek met Initial™ van GC

GC biedt de gebruikers van Initial de modernste en meest esthetische beschilderbare keramische oplossingen. Afhankelijk van het geval en de gewenste eigenschappen leveren twee productlijnen, Initial Lustre Pastes NF en Initial Spectrum Stains, het verwachte resultaat. Deze zijn geschikt voor een breed CTE-bereik zodat u kunt werken met het complete Initial-keramiegamma van GC en vrijwel alle andere soorten keramiek.

Initial Lustre Pastes NF, de unieke, 3D-opverfbare keramiek van GC die diepte en authenticiteit toevoegt aan al uw kostbare werkstukken ... gewoon door te verven. U hebt geen complexe laagopbouw of extra bakcycli meer nodig om een ongeëvenaarde vitaliteit en een natuurlijke uitstraling voor al uw restauraties te verkrijgen.

Initial Spectrum Stains bieden een 2D-kleureffect en kunnen gebruikt worden voor zowel interne als externe kleuring. Ze leveren een zeer verfijnd eindresultaat met een glanzend oppervlak zonder verlies aan textuur.

Beide producten zijn complementair. In sommige gevallen worden ze beide gebruikt; de Spectrum Stains kunnen bijvoorbeeld worden toegevoegd aan de Lustre Pastes NF of aan de keramische bulkopbouwpoeders.

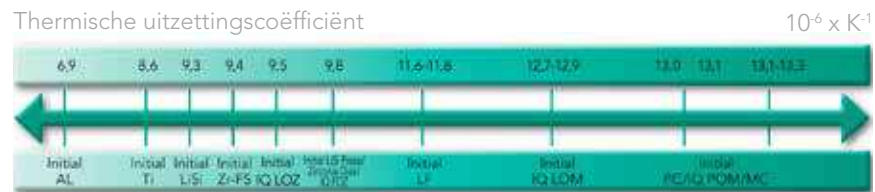

Compatibiliteit met de Initial keramiek-lijn




Lustre Pastes NF V-kleuren

Met de 'Body A-D'-tinten is de vereiste V-kleur zeer eenvoudig en in een mum van tijd te verwezenlijken. Met de andere beschikbare kleuren kunt u de restauraties verder karakteriseren voor een perfect geassimileerd eindresultaat.



Lustre Pastes NF Gum Shades

De Gum Shades zijn gebaseerd op een zorgvuldige selectie van niet-fluorescerende roze keramiek-deeltjes waarmee het natuurlijke uiterlijk van tandvlees perfect wordt geïmiteerd. Een levensechte overgang van de kroonrand naar de gingiva kan met gemak worden bereikt.

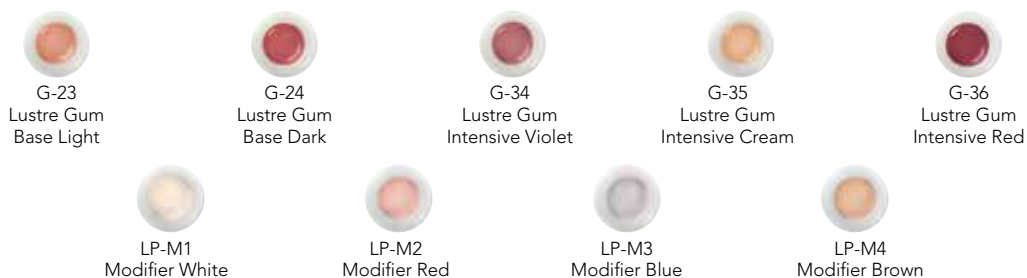

Spectrum Stains

De kleuren en glazuur zijn ontwikkeld voor het uitwendig kleuren en glazuren van tandkleurige keramische materialen en de interne individualisering van gelaagd keramiek. Compatibel met een breed CTE-bereik, zijn de Initial Spectrum Stains perfect geschikt voor bijna alle soorten gebitskeramiek. Ze zijn in het bijzonder aangepast aan het esthetische kleurenconcept van het Initial keramiek-portfolio.

Initial Spectrum Stains zijn poederkleuren verkrijgbaar in 16 kleuren die de esthetiek van uw restauraties extra kracht geven.

Ongeacht de applicatiewijze wordt een zeer verfijnd eindresultaat verkregen, waarbij de oppervlakte-textuur behouden blijft en een optimaal glansniveau wordt gegarandeerd.



Natuurlijke schoonheid met Initial Lustre Pastes NF

De perfecte afwerking van uw restauraties

U hebt geen complexe laagopbouw of extra bakcycli meer nodig om ongeëvenaarde vitaliteit en een natuurlijke uitstraling voor al uw restauraties te verkrijgen.

Met Initial Lustre Pastes NF kunt u kleurdiepte en levensechte translucentie bereiken gewoon door te verven.

Initial Lustre Pastes NF zijn gebaseerd op een speciale mix van fijne keramische deeltjes. De stappen om uw werkstukken te voltooien blijven identiek, ongeacht de techniek die gebruikt wordt om de sokkel te creëren.

Door gebruik te maken van de verdunningsvloeistof blijft de optimale consistentie tot het einde toe behouden.

De gewenste V-kleur wordt gemaakt door de applicatie van Lustre Pastes NF 'Body A - D'. Dit proces omvat alles wat nodig is om in een mum van tijd V-kleuren te maken.

Voor een betere karakterisering kunt u eenvoudigweg de andere beschikbare kleuren gebruiken om prachtige esthetische resultaten te creëren.



Sokkel



Applicatie van LP Neutral



Applicatie van Body Shades



Uiteindelijke restauratie met kleur en glans

Eenvoudige aanpassingen

Met Initial Lustre Pastes NF kunt u uw werkstukken eenvoudig aanpassen.

Het veranderen van kleur, helderheid, grijswaarde of het toevoegen van extra oppervlakteglans is nog nooit zo eenvoudig geweest!



Helderheid



Kleur



Grijswaarde

“Opverfbare
keramiek biedt
een concrete
weergave van
de meest subtiele
emoties.”



Voeg karakter toe aan uw one body-restauraties ...

De unieke consistentie zorgt voor eenvormige aanpassingen en een homogeen aanzien. De gewenste oppervlaktestructuur/gladheid van de Lustre Paste NF-laag kan bereikt worden door de restauratie zacht te laten vibreren of te laten condenseren. Geen complexe lagen of extra bakcycli meer; het is snel, gemakkelijk en veilig. De pasta's zijn gebruiksklaar en bezitten goede thixotrope eigenschappen, voor een eenvoudige en precieze applicatie.



Volledige anatomische frames in lithium disilicaat zoals LiSi Press kunnen worden geïndividualiseerd met Lustre Pastes NF.



Zoekt u een manier om een levendige uitstraling te geven aan uw met CAD/CAM-vervaardigde monolithische werkstukken van zirkonium zoals met de Initial Zirconia Disk? Lustre Pastes NF zijn de oplossing in elke situatie.



Met de GC Initial IQ- One Body, Press-over-Metal- of Press-over-Zircon-systemen kunnen de kenmerken en glans in slechts één bakcyclus toegevoegd worden.

... of integreer ze in de lagen voor diepte-effect.



Cut-back



Applicatie van Lustre Pastes NF (+bakken)



Applicatie van opale/incisale massa's (+bakken)



Uiteindelijk resultaat

Behaal de beste esthetische resultaten door de Lustre Pastes NF bij de cut-backtechniek te gebruiken voor uw kroon- en brugwerk in pers- en opbouwtechniek. Na het schilderen met Lustre Pastes NF wordt de laatste hand gelegd met GC Initial verblendkeramiek: CL-F voor hoge translucentie en opal- en enamelmassa's voor incisale effecten.



Verf uw rode en witte esthetiek ...

Twee sets, één aanpak.



Startpunt



Applicatie van de verschillende Initial Lustre Pastes NF Gum Shades



Karakterisering met V-kleuren



Uiteindelijk resultaat



... met levensechte overgangen, zelfs op zirkonium onderstructuren.



Met de toenemende populariteit van zirkonium en van restauraties die met CAD/CAM zijn geproduceerd, biedt GC oplossingen om dezelfde esthetische normen te handhaven. Uw monolithische werkstukken zullen er natuurlijk en levendig uitzien met Initial Lustr Paste NF. De unieke samenstelling biedt een grotere interactie met het onderliggende keramische materiaal en werkt optisch gezien als keramische bulkopbouwpoeders, waardoor het 3D-effect van uw restauratie wordt versterkt.

Eenvoud kan mooi zijn!



Vergroot uw kleurmogelijkheden met Initial Spectrum Stains

Initial Spectrum Stains bevatten pigmenten die gesinterd zijn in een veldspaatmatrix voor stabiliteit en om reproduceerbare, consistente resultaten mogelijk te maken. U kunt eindeloos variëren en spelen met de Initial Spectrum Stains. Gebruik ze zowel voor inwendige als uitwendige kleuring. Ze kunnen ook worden toegevoegd aan de keramische massa's of aan de Initial Lustre Pastes NF voor nog meer mogelijkheden!

Twee consistenties, beide met behoud van textuur


Initial Spectrum Stains kunnen worden aangebracht met de door de gebruiker gewenste consistentie, als een pasta of vloeibaarder. Het eindresultaat is hetzelfde, ongeacht de gebruikte consistentie: een zeer precieze kleur en glans, met behoud van de oppervlaktestructuur van de restauratie; ze zijn de 2D-tegenhanger van de Initial Lustre Pastes NF.



Kroon met fijne textuur,
klaar om geglaazuurd te worden



Glazuren met vloeibare of pasteuze
consistentie

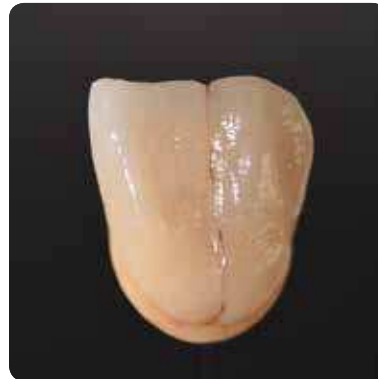

Na het bakken: gekleurd en geglaazuurd
met behoud van een fijne textuur



Intern ...



... of extern kleuren



2D- en 3D-keramische verfoplossingen ... van GC

GC Initial Lustre Pastes Set NF - V-kleuren

- 4 Body Shades en 1 Neutral om op de eenvoudigste manier een V-kleur-restauratie te realiseren.
- 9 Effectkleuren die uw artistieke zijde aanspreken; breng white spots, decalcificaties, haarscheurtjes en barstjes aan.

Samenstelling set:

1x Neutral (4 g)
1x Value (4 g)
4x Body Shades (4 x 4 g)
8x Enamel effectkleuren (8 x 4 g)
1x Verdunningsvloeistof (8 ml)
1x Refreshing Liquid (8 ml)
1 mengpalet
2 penselen
Kleurschema
Technische handleiding



Lustre Enamel Effect 9 (Dieporanje) en 10 (Schemering) maken geen deel uit van de set, maar kunnen apart besteld worden.

GC Initial Lustre Pastes Set NF - Gum Shades

- Vijf gebruiksklare tandvleeskleurige pasta's met een ideale thixotropie voor een gemakkelijke en nauwkeurige applicatie.
- Vier mengbare Gum Modifiers voor een onbegrensde creativiteit bij het nabootsen van de natuurlijke harmonie van het tandvlees.

Samenstelling set:

5x Gum Shades (5 x 4 g)
4x Stain Modifier voor LP NF (4 x 3 g)
Verdunningsvloeistof (8 ml)
Refreshing Liquid (8 ml)
1 mengpalet
2 penselen
Kleurschema
Technische handleiding



GC Initial Spectrum Stains

- 16 poederkleuren voor esthetische verfijning.
- Twee consistenties met een verfijnd eindresultaat, met behoud van textuur en een optimaal glansniveau.

Samenstelling set:

16x Initial Spectrum Stains SPS (16 x 3 g)
1x Initial Spectrum Glaze Powder GL (10 g)
1x Initial Spectrum Glaze Liquid (25 ml)
Initial Spectrum Glaze Paste Liquid (8 g)
Initial Spectrum Stain kleursleutel



GC EUROPE N.V.

Hoofdkantoor
Research Park
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax +32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC Europe NV

Benelux Sales Department
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 13
B-3001 Leuven
Tel. +32.16 74.18.60
info.benelux@gc.dental
<http://benelux.gceurope.com>

GC