


# L'art de peindre les céramiques

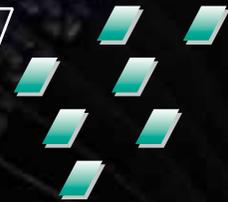

*initial*<sup>TM</sup>  
Painting Solutions

Lustre Pastes NF  
Spectrum Stains

*GC*



# Peignez votre esthétique avec Initial™ de GC

GC offre aux utilisateurs de la gamme Initial les solutions céramiques à peindre les plus modernes et les plus esthétiques. En fonction du cas et des propriétés souhaitées, deux matériaux, Initial Lustre Pastes NF et Initial Spectrum Stains, fourniront le résultat attendu. Ils conviennent à une large gamme de CET, ce qui vous permet de travailler avec la gamme complète de céramiques GC Initial et presque tous les types de céramiques.


Les Initial Lustre Pastes NF, céramiques uniques en 3D de GC, apportent profondeur et authenticité à tous vos précieux travaux... juste en peignant. Vous n'avez plus besoin de couches complexes ni de cycles de cuisson supplémentaires pour obtenir une vitalité inégalée et un glaçage naturel pour toutes vos restaurations.

Les Initial Spectrum Stains offrent un effet de coloration 2D et peuvent être utilisés pour une coloration interne et externe. Ils fourniront un résultat final très raffiné avec une surface brillante tout en préservant la texture.

Les deux produits sont complémentaires. Dans certains cas, ils sont utilisés ensemble. Par exemple, les Spectrum Stains peuvent être ajoutés aux Lustre Pastes NF ou aux poudres de stratification céramique.



Compatibilité avec la gamme de céramiques Initial

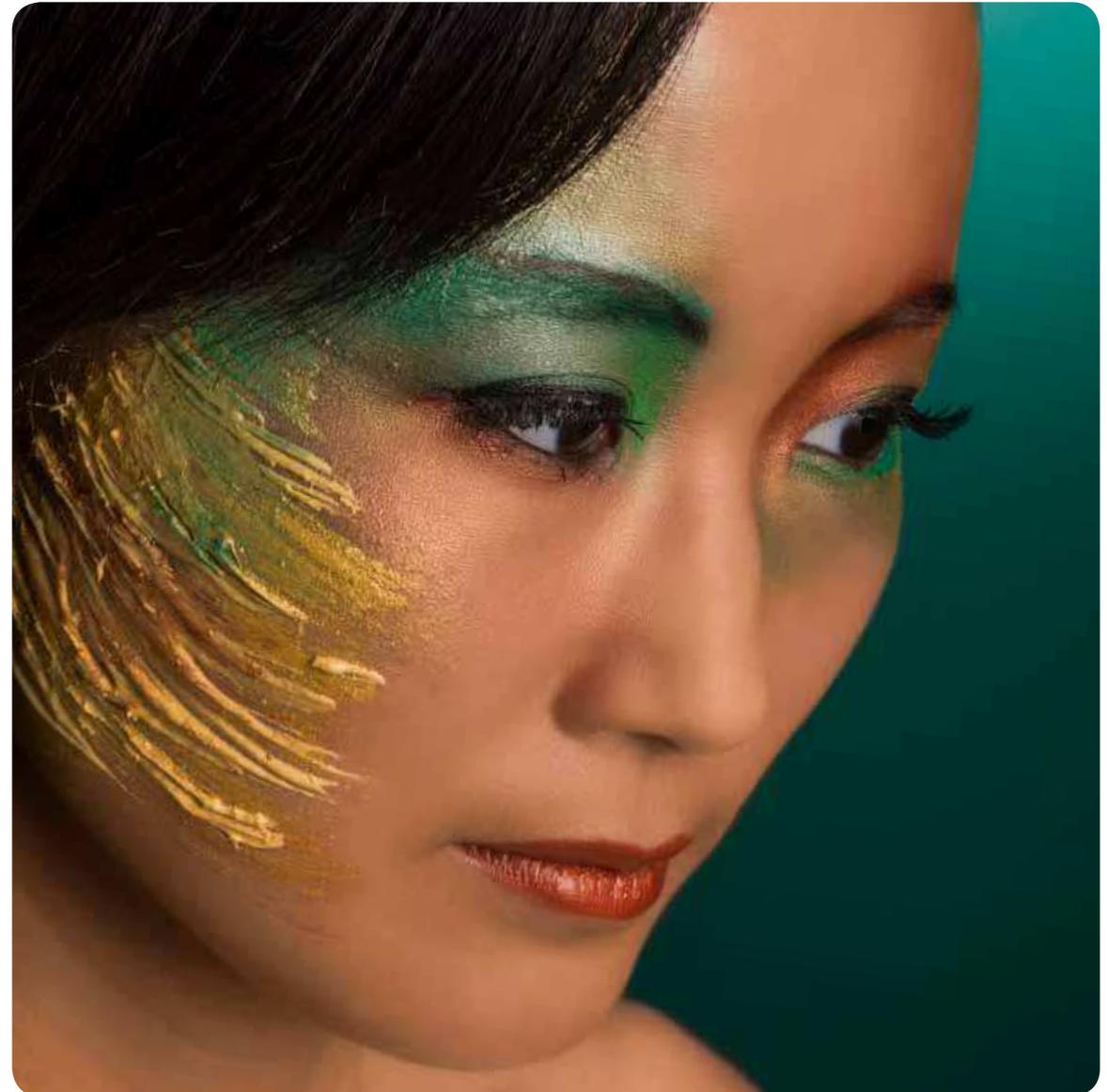


## Lustre Pastes NF V-Shades

Avec les teintes « Body A-D », la teinte V requise peut être obtenue très facilement et en peu de temps. Avec les autres couleurs disponibles, vous pouvez caractériser davantage les restaurations pour un résultat final parfait.



## Lustre Pastes NF Gum Shades

Les Gum Shades sont basées sur une sélection réfléchie de particules de céramique de couleur rose non fluorescentes pour imiter parfaitement l'apparence de la gencive naturelle. Une transition naturelle de la limite couronne/gencive est facilement réalisée.

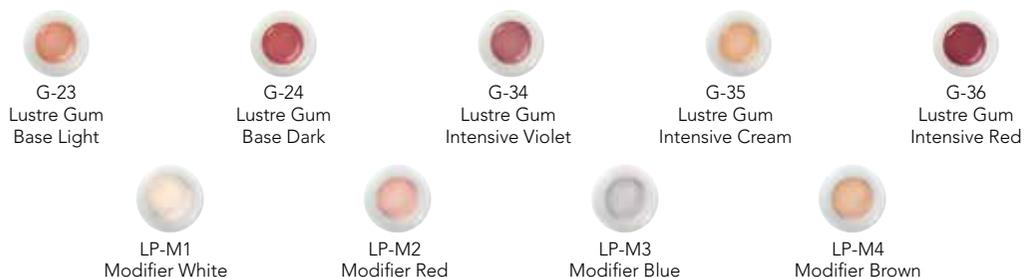


## Spectrum Stains

Ses colorants et glazes sont développés pour la coloration et le glaçage externe de matériaux céramiques et pour l'individualisation interne des céramiques de stratification. Compatibles avec une large gamme de CET, les Initial Spectrum Stains sont parfaitement adaptés à presque tous les types de céramiques dentaires et tout particulièrement au concept de teintes esthétiques de la gamme de céramique Initial.

Les Initial Spectrum Stains sont des colorants en poudre disponibles en 16 teintes renforçant l'esthétique de vos restaurations.

Quel que soit le mode d'application, un très bon résultat final sera obtenu en maintenant la texture de la surface et en assurant un niveau de brillance optimal.

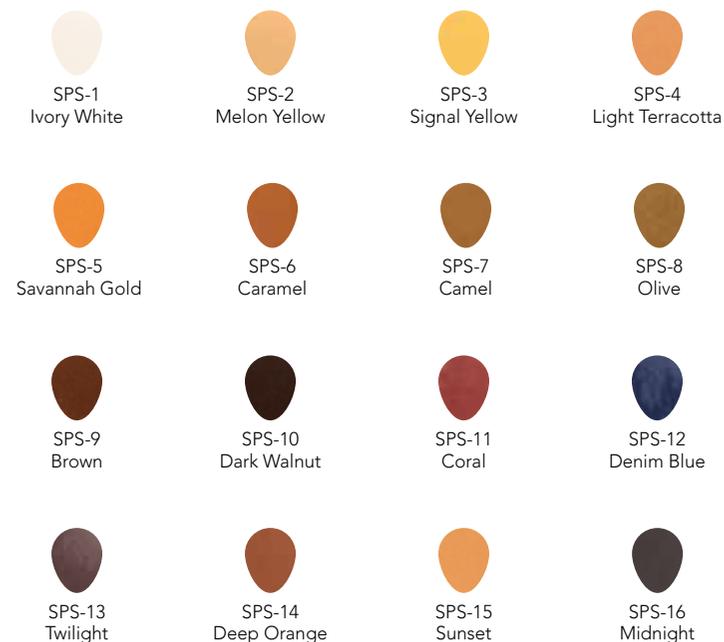

# Beauté profonde avec Initial Lustre Pastes NF

## La finition parfaite de vos restaurations

Vous n'avez plus besoin de couches complexes ni de cycles de cuisson supplémentaires pour obtenir une vitalité inégalée et un glaçage naturel pour toutes vos restaurations. Avec Initial Lustre Pastes NF, vous pouvez obtenir une profondeur de couleur et une translucidité naturelle... simplement en peignant.

Les pâtes Initial Lustre NF sont basées sur un mélange spécial de fines particules de céramique. Les étapes restent identiques, quelle que soit la technique utilisée pour créer la base. En utilisant le liquide de dilution, la consistance optimale est maintenue jusqu'au bout.

La teinte V requise est créée par l'application du Lustre Pastes NF " Body A-D ". Vous disposez du nécessaire pour créer des nuances V en peu de temps.

Pour une caractérisation améliorée, utilisez simplement les autres teintes disponibles... pour des résultats hautement esthétiques.



Base



Application du LP Neutral



Application de Body Shades



Restauration finale colorée et lumineuse

## Modifications faciles

Il est facile de modifier vos éléments avec les Initial Lustre Pastes NF.

Changer la couleur, la luminosité, la valeur de gris ou ajouter un brillant de surface n'a jamais été aussi simple !!



Luminosité



Couleur



Valeur de gris

“Les céramiques  
peintes  
permettent une  
représentation  
concrète des  
émotions les plus  
subtiles.”



## Ajoutez du caractère à vos restaurations one body...

La consistance unique garantit des modifications et une apparence homogène. La texture de surface attendue/douceur de la couche Lustre Pastes NF peut être obtenue en vibrant doucement ou en condensant la restauration. Ni couches complexes ni cycles de cuisson supplémentaires ne sont nécessaires : c'est rapide, facile et sûr. Les pâtes sont prêtes à l'emploi avec une thixotropie fine, pour une application aisée et précise.



Des armatures anatomiques complètes en disilicate de lithium, telles que LiSi Press, peuvent être utilisées et individualisées avec Lustre Pastes NF.



Vous recherchez un moyen d'ajouter de la vitalité à vos monolithiques en zircone tels que Initial Zirconia Disk . Les pâtes Lustre NF sont la solution dans tous les cas.



Avec les systèmes GC Initial IQ - One Body, Press-over-Metal ou Press-over-Zircon, les caractéristiques et la brillance peuvent être ajoutées en un seul cycle de cuisson.

... ou intégrez-les en couches pour plus de profondeur



Cut back



Application de Lustre Pastes NF (+ cuisson)



Application de masses Opal/Incisal (+ cuisson)



Résultat final

Obtenez les résultats esthétiques les plus remarquables en utilisant les pâtes Initial Lustre Pastes NF dans la technique cut back avec vos pièces pressées ou stratifiées. Après avoir peint avec Lustre Pastes NF, les finitions sont réalisées avec la céramique de stratification spécifique GC Initial : CL-F pour une translucidité élevée et les masses Opal et Enamel pour les effets incisifs.



# Peignez votre esthétique rouge et blanche...

Deux coffrets, une approche.



Point de départ



Application des différentes teintes Initial Lustre Pastes NF Gum



Caractérisation avec V-Shades



Résultat final



... avec des transitions naturelles, même sur des armatures en zircone.



Avec la popularité croissante des restaurations en zircone et CAD/CAM, GC propose des solutions pour maintenir les mêmes normes esthétiques. Vos monolithiques auront un aspect naturel et dynamique avec Initial Lustre Paste NF. Leur composition unique offre plus d'interaction avec le matériau céramique sous-jacent et agit optiquement comme les poudres de stratification céramique, renforçant ainsi l'effet 3D de votre restauration. La simplicité peut être belle !



# Élargissez vos possibilités de coloration avec Initial Spectrum Stains

Les Spectrum Initial Stains contiennent des pigments qui sont frittés dans une matrice de feldspath pour assurer la stabilité et permettre des résultats reproductibles et réguliers. Vous pouvez varier et jouer sans fin avec Initial Spectrum Stains. Utilisez-les pour la coloration interne et externe. Ils peuvent également être ajoutés aux masses céramiques ou aux pâtes Initial Lustre Pastes NF pour augmenter encore les possibilités !

## Deux consistances préservant la texture

Les Initial Spectrum Stains peuvent être appliqués dans la consistance préférée par l'utilisateur, sous forme de pâte ou plus liquide. Quelle que soit la consistance utilisée, le résultat final sera le même : coloration et brillance avec une définition très fine, préservant la texture de surface de la restauration ; ils sont la contrepartie 2D des Initial Lustre Pastes NF.



Couronne à texture fine prête à être glacée



Glaçage avec la consistance liquide ou pâte



Après cuisson : coloration et glaçage préservant la fine texture



Coloration interne ...



... ou externe



## Solutions de peinture céramique 2D et 3D... de GC

### GC Initial Lustre Pastes NF - V-Shades

- 4 Body Shades et 1 Neutral pour réaliser une restauration de la teinte V de la manière la plus simple
- 9 Effect Shades pour libérer votre potentiel artistique et peindre des taches blanches, des décalcifications, craquelures et lignes de fissures.

Composition du coffret :

1 Neutral (4g)  
1 Value (4g)  
4 Body Shades (4x4g)  
8 Enamel Effect Shades (8x4g)  
1 Liquide de dilution (8ml)  
1 Liquide de rafraichissement (8ml)  
1 plateau de mélange  
2 pinceaux couleur  
Tableau de correspondance des teintes  
Manuel technique



Lustre Enamel Effect 9 (Deep Orange) et 10 (Twilight) ne sont pas inclus dans le coffret mais peuvent être commandés séparément.

### GC Initial Lustre Pastes NF - Gum Shades

- 5 pâtes gum colorées prêtes à l'emploi avec une thixotropie idéale pour une application facile et précise.
- 4 Gum Modifiers mélangeables permettant une créativité illimitée pour copier l'harmonie gingivale naturelle.

Composition du coffret :

5 Gum Shades (5x4g)  
4 Stain Modifier pour LP NF (4x3g)  
1 Liquide de dilution (8ml)  
1 Liquide de rafraichissement (8ml)  
1 plateau de mélange  
2 pinceaux couleur  
Tableau de correspondance des teintes  
Manuel technique



### GC Initial Spectrum Stains

- 16 poudres conférant un raffinement esthétique
- Deux consistances pour un résultat final pur préservant la texture et avec un niveau de brillance optimal.

Composition du coffret :

16 Initial Spectrum Stains SPS (16x3g)  
1 Initial Spectrum Glaze Poudre GL (10g)  
1 Initial Spectrum Glaze Liquide (25ml)  
Initial Spectrum Glaze Paste Liquide (8g)  
Teintier Initial Spectrum Stain



GC EUROPE N.V.

Head Office  
Research Park  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32. 16. 74. 10.00  
Fax +32. 16. 40. 48. 32  
info.gce@gc.dental  
www.gceurope.com

GC Europe NV

Benelux Sales Department  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 13  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.18.60  
info.benelux@gc.dental  
<http://benelux.gceurope.com>

GC AUSTRIA GmbH

Swiss Office  
Bergstrasse 31c  
CH-8890 Flums  
Tel. +41.81.734.02.70  
Fax. +41.81.734.02.71  
info.switzerland@gc.dental  
<http://switzerland.gceurope.com>

The logo for GC, featuring the letters 'GC' in a bold, italicized, sans-serif font. The letters are white with a black outline and are set against a dark background. The 'G' and 'C' are connected at the top.