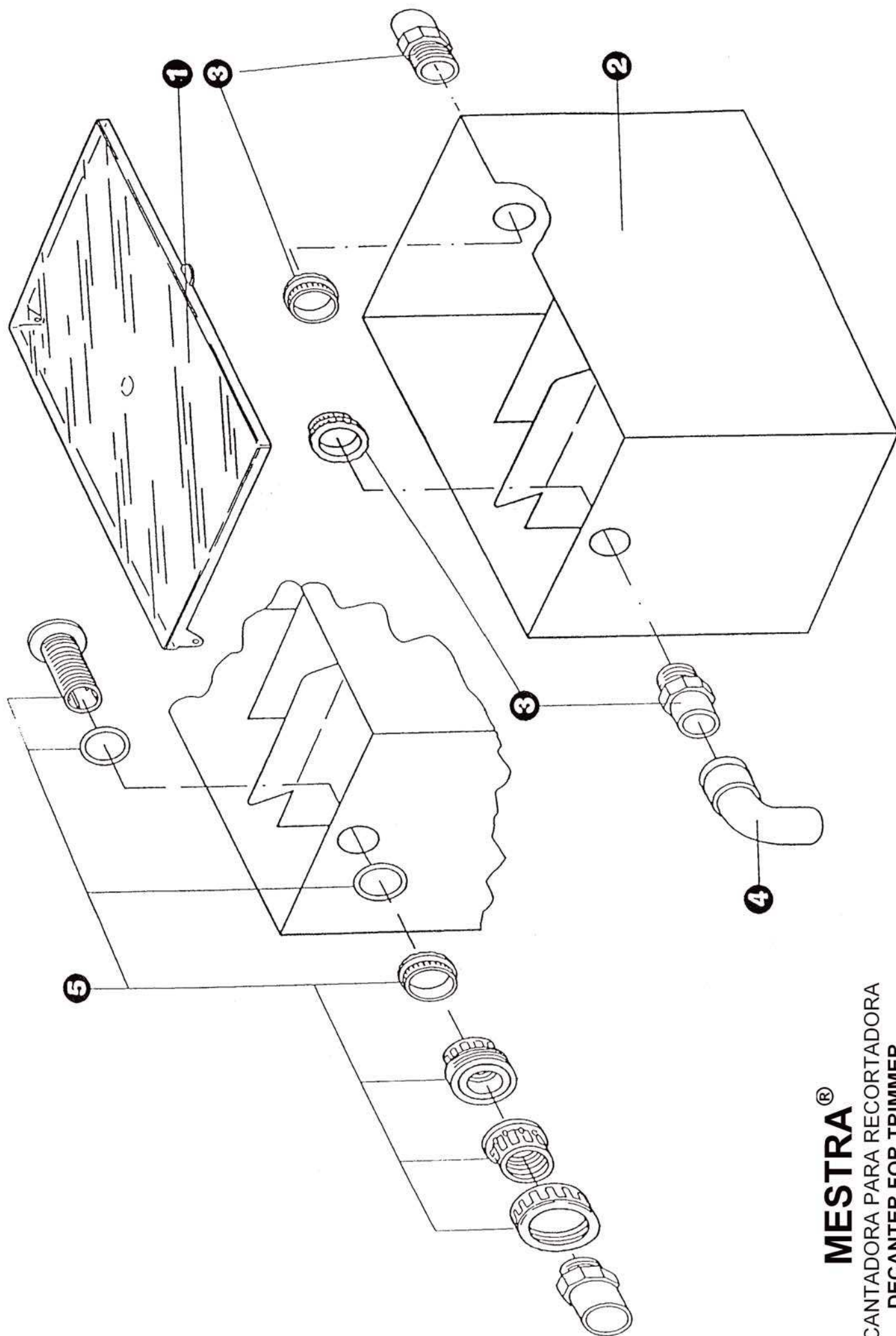




MESTRA®
 DECANTADORA PARA RECORTADORA
 DECANTER FOR TRIMMER
 DECANTEUR POUR DECOUPEUSE
 R-080086

MESTRA®
DECANTADORA PARA RECORTADORA
DECANTER FOR TRIMMER
DECANTEUR POUR DECOPEUSE
R-080086

Nº	Ref.	CONCEPTO	DESCRIPTION
1	080086 - 01	Tapa	Lid
2	080086 - 02	Cuba	Container
3	080086 - 03	Manguito con tuerca	Bushing with nut
4	080086 - 04	Codo	Elbow
5*	080088	Kit de desmontaje rápido (opcional)	Quick removing kit (optional)

*El kit de desmontaje rápido facilita la extracción de la decantadora para su limpieza. Desenroscando la tuerca A de la pieza B, se desacopla la decantadora. (Se necesitan dos kits por decantadora, uno en el lateral derecho y otro en el izquierdo).

*The quick removing kit makes easy the extraction of the decanter for cleaning. By releasing nut a from part B, the decanter is free. (You need two kits, one in the right side and the other in the left side).