

#whdentalwerk



video.wh.com

Plus
d'info sur
wh.com



bien, parfait, perfecta.

Expertise en laboratoire
depuis 1926



perfecta

People have Priority



Jürgen Auffarth

propriétaire d'un laboratoire dentaire et conférencier international, Salzbourg, Autriche

« Ces instruments sont discrets, esthétiques et performants. »



Enrico Steger

prothésiste et fondateur de la société Zirkozahn, Gais, Tyrol du Sud, Italie

« Nous utilisons des pièces à main W&H avec nos appareils depuis des années. »



Wolfgang Weisser

propriétaire de laboratoire et éditeur, Aalen, Allemagne

« L'appareil est un véritable plus pour notre laboratoire »



Bienvenue chez W&H

Un succès mondial

L'entreprise familiale W&H est l'un des principaux fournisseurs d'appareils de précision pour l'art dentaire au monde. W&H emploie près de 1.200 personnes à travers le monde.



Expertise en laboratoire depuis 1926

C'est en 1926 que furent fabriquées les premières pièces à main pour les prothésistes dentaires. Encore aujourd'hui, le développement, la production et le service après-vente des unités de laboratoire se concentrent à Salzbouurg.



Service irréprochable et garantie de 24 mois

People have Priority : chez W&H, l'homme est au centre de toutes nos préoccupations.

Pour vous : l'assurance d'avoir un produit de qualité, conçu et fabriqué de façon durable et bénéficiant d'une garantie de 24 mois, avec un service après-vente de tout premier ordre.

Un appareil adapté aux besoins de chacun



Naomi M.

23 ans, Asie,
employée en tant que prothésiste depuis 3 ans

Perfecta 300

« Qualité parfaite – il fait vraiment tout !
En plus, le service est irréprochable ! »



Emanuel C.

41 ans, Amérique du Sud,
prothésiste indépendant

Perfecta 600

« Je n'utilise pratiquement plus le pistolet à air :
la fonction purge est intégrée à la pièce à main ! »



Carl S.

Amérique du Nord,
responsable d'un laboratoire dentaire

Perfecta 900

« Génial ! Bien plus puissant qu'une
turbine. L'outil idéal pour le travail de la céramique. »



Synoptique modèles Perfecta



| | Perfecta 300 | Perfecta 600 | Perfecta 900 | Perfecta 900 Set* |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Pièces à main | | | | |
| Pièce à main technique de 5,5 Ncm, 1 000 – 40 000 tr./min | ● | - | - | - |
| Pièce à main technique de 7,8 Ncm, 1 000 – 50 000 tr./min | - | ● | ○ | ● |
| Pièce à main grande vitesse de 0,7 Ncm, 5 000 – 100 000 tr./min | - | - | ● | ● |
| Moteur sans charbon | ● | ● | ● | ● |
| Utilisable avec instruments de diamètre 1,6 / 2,35 / 3,0 mm | - / ● / ○ | - / ● / ○ | ● / ○ / ○ | ● / ● / ○ |
| Fonctions spéciales | | | | |
| Fonction purge | - | ● | ● | ● |
| Programme automatique on/off / Tempomat | ● / - | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Sens de rotation droite et gauche | ● | ● | ● | ● |
| Versions | | | | |
| Unit de table avec pédale / commande au genou / commande au pied | ● / ● / ● | ● / ● / ● | ● / ● / - | ● / ● / - |
| Élément de commande indépendant (en option avec la commande au pied) | ● | ● | ● | ● |
| Moteur « type E » avec raccord ISO, 5,5 Ncm, 1 000 – 40 000 tr./min | ○ | - | - | - |
| Garantie | | | | |
| 24 mois | ● | ● | ● | ● |
| Accessoires | | | | |
| Support pour élément de commande | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Adaptateur pour paralléliseur | - | - | ○ | ○ |
| Pièce à main de retouche 945 pour moteur ISO | ○ | - | - | - |

● Équipement standard

○ en option

- non disponible

Pour plus d'informations, consultez le site wh.com

*Le kit Perfecta 900 comprenant 2 pièces à main n'est pas une référence standard. Il faudra donc commander séparément la pièce à main technique et le cordon moteur.



Silvia L.

ans, Europe,
propriétaire d'un laboratoire

Kit* Perfecta 900

« Mes postes de travail : un unit, deux pièces à main, pour tous les matériaux ! »



Pièces à main Perfecta

La perfection intégrée

Les deux pièces à main intègrent une fonction purge. Ce qui vous évite d'utiliser un pistolet à air et vous permet de gagner du temps. De plus, avec le moteur électrique ultra puissant, vous travaillez à vitesse de rotation constante et en toute discrétion. L'ergonomie des pièces à main assure une manipulation aisée : vous travaillez plus longtemps, sans fatigue. Et parce que W&H privilégie la qualité, les deux pièces à main sont garanties 24 mois.




Pièce à main technique

Pièce à main grande vitesse



La pièce à main technique

Les avantages

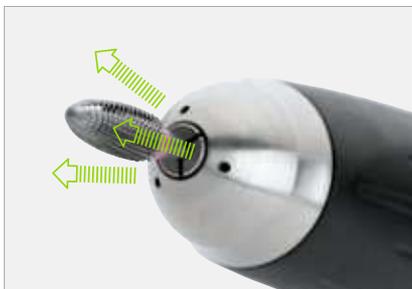

Avec la fonction purge intégrée, résidus de matériau et poussière sont évacués en un clin d'oeil. Vous nettoyez en même temps le système de serrage.



Une puissance exceptionnelle : vous disposez toujours d'une puissance suffisante en réserve, même lors des travaux exigeants.



Le moteur de « type E » à raccord ISO n'est disponible (en option) que pour le Perfecta 300. Il permet d'utiliser n'importe quelle pièce à main ISO.

La pièce à main grande vitesse

Les avantages



La vitesse de rotation du moteur est facile à régler et peut être adaptée à tous les matériaux céramiques.



Travaillez efficacement et discrètement avec une puissance 10 fois supérieure à celle d'une turbine (également en rotation vers la gauche).



Le triple spray est facile à actionner. Il protège contre les micro-fissures et garantit un refroidissement optimal dans toutes les situations.

Un appareil pour tous les matériaux

Avec le Perfecta 900, vous pouvez simultanément raccorder la pièce à main grande vitesse et la pièce à main technique et ainsi traiter tous les matériaux avec un seul appareil.



En ligne de mire À portée de main

Votre travail est suffisamment compliqué, alors autant simplifier l'utilisation : tous les modèles Perfecta sont équipés d'un élément de commande facile à manipuler. Il vous permet de gérer toutes les fonctions et de basculer entre les deux pièces à main sur le Perfecta 900. Le grand écran affiche clairement la vitesse de rotation. Vous sélectionnez la vitesse de rotation maximale à l'aide du bouton de réglage situé au centre de l'élément de commande.



L'élément de commande

Les avantages



Les programmes automatiques facilitent le travail


En « mode on/off », la vitesse de rotation sélectionnée est automatiquement atteinte au démarrage du moteur. En mode « Tempomat », la vitesse de rotation réglée est enregistrée après deux secondes et automatiquement maintenue.



Changer de programme, pas d'unité

Une seule pression de touche suffit pour passer de la pièce à main grande vitesse à la pièce à main technique sur le Perfecta 900. Un seul appareil permet ainsi de traiter parfaitement tous les matériaux.

Contrôle parfait dans la version de votre choix

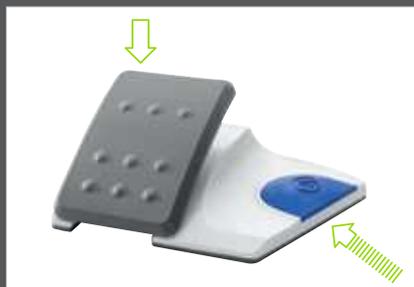

Unit de table

Avec la pédale, vous démarrez le moteur, réglez la vitesse de rotation et activez la fonction purge.



Commande au genou

Avec le genou, vous réglez la vitesse et activez la fonction purge.



Commande au pied

Avec la commande au pied, vous activez la fonction purge, réglez la vitesse de rotation et inversez le sens de rotation du moteur.

La gamme Perfecta



- 1 Unit de table
- 2 Commande au genou
- 3 Commande au pied (Perfecta 300 / Perfecta 600)
- 4 Unit de table (Perfecta 900, en version commande au genou avec levier n°8)
- 5 Élément de commande
- 6 Pédale de réglage
- 7 Touche fonction purge
- 8 Levier pour fonction purge
- 9 Pièce à main technique (en option sur le Perfecta 900)
- 10 Moteur « type E » avec raccord ISO (en option, uniquement pour Perfecta 300)
- 11 Pièce à main grande vitesse
- 12 Réservoir de liquide d'irrigation (400 ml, uniquement pour Perfecta 900)

Les accessoires Perfecta



Adaptateur pour paralléliseur – 100 % précision

Avec l'adaptateur pour paralléliseur, vous pouvez fixer la pièce à main grande vitesse dans presque toutes les fraiseuses. Le parallélisme est parfait et les pièces prothétiques sont fraisées avec une précision maximale.



Kit outil et nettoyage intégré

Pratique, le support pour pièce à main contient un kit outil et nettoyage. Il permet d'entretenir facilement la pièce à main technique.



Support positionnable selon les besoins

Toujours en ligne de mire : avec le support réglable, vous pouvez positionner l'élément de commande sur le mur, sur la table ou sur une étagère.

Pièce à main de retouche 945

Avec la pièce à main de retouche 945, vous effectuez les corrections, adaptations et finitions des prothèses dentaires et des appareils orthodontiques, rapidement et efficacement. En outre, la pièce à main s'adapte à tous les moteurs à raccord ISO.



Caractéristiques techniques



| Références | Perfecta 300 | Perfecta 600 | Perfecta 900 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Pièces à main | | | |
| Pièce à main technique de 5,5 Ncm, 1 000 – 40 000 tr./min. | ● | - | - |
| Pièce à main technique de 7,8 Ncm, 1 000 – 50 000 tr./min. | - | ● | ○ |
| Pièce à main grande vitesse de 0,7 Ncm, 5 000 – 100 000 tr./min. | - | - | ● |
| Moteur sans charbon | ● | ● | ● |
| Fonctions spéciales | | | |
| Fonction purge | - | ● | ● |
| Programme automatique on/off / Tempomat | ● / - | ● / ● | ● / ● |
| Sens de rotation droite et gauche | ● | ● | ● |
| Versions | | | |
| Unit de table avec pédale / commande au genou / commande au pied | ● / ● / ● | ● / ● / ● | ● / ● / - |
| Élément de commande externe (en option avec la commande au pied) | ● | ● | ● |
| Moteur « type E » avec raccord ISO, 5,5 Ncm, 1 000 – 40 000 tr./min | ○ | - | - |
| Garantie | | | |
| 24 mois | ● | ● | ● |

● Équipement standard

○ en option

- non disponible

Pour plus d'informations, consultez le site wh.com

Pièce à main technique



Pièce à main grande vitesse

Photos non contractuelles. Le matériel supplémentaire et les accessoires illustrés ne font pas partie de la livraison standard.

Fabricant :

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
 Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
 5111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Distribution :

W&H France
 4 rue Ettore Bugatti
 67201 Eckbolsheim, **France**
t. +33 388 773600
f. +33 388 773601
commercial.fr@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
 Industriepark 9
 8610 Uster, **Schweiz**
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com